

**STOPS BLEEDING  
INSTANTLY!**

# WOUNDSEAL<sup>®</sup>

## +APPLICATOR

**¡DETIENE EL SANGRADO  
AL INSTANTE!**

**Topical Powder  
For Minor External Bleeding**

**Polvo tóxico  
para sangrado externo leve**

**POWDER + PRESSURE = INSTANT SCAB**

**POLVO + PRESIÓN = COSTRA INSTANTÁNEA**

**TAMPER EVIDENT: Do not use if blister seal is damaged.**

Package contains four (4), single use applications in pouches. Enclosed applicator swab can be used to apply WoundSeal Powder to hard-to-reach wounds, or to apply powder to another person. Each pouch contains one (1) single use application which includes one (1) applicator and one (1) blister pack of WoundSeal Powder.

### INSTRUCTIONS FOR USE:


If possible, clean wound and apply powder after bleeding resumes; blood must be present for powder to work.

**PEEL BLISTER AND LOAD  
APPLICATOR WITH POWDER.**



**DESPEGUE EL BLÍSTER Y CARGUE  
EL APLICADOR CON POLVO.**

**COVER WOUND COMPLETELY  
WITH POWDER.**

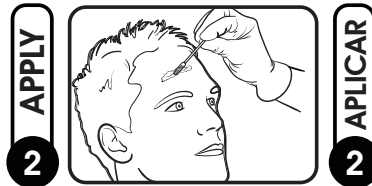

**CUBRA LA HERIDA POR COMPLETO  
CON EL POLVO.**

**PRESS FOR 30 SECONDS, USING  
APPLICATOR OR FINGERS, UNTIL SCAB  
FORMS AND BLEEDING STOPS.**



**PRESIONE DURANTE 30 SEGUNDOS  
CON EL APLICADOR O CON LOS DEDOS  
HASTA QUE SE FORME UNA COSTRA  
PROTECTORA Y EL SANGRADO SE  
DETENGA.**

Repeat application as needed. The protective scab may be left in place until it falls off naturally. Avoid wetting scab for one (1) hour.

**WOUND COVERAGE AREA:** One (1) WoundSeal application is sufficient to cover a wound area of up to 4.6 cm<sup>2</sup> (0.7 in<sup>2</sup>) to a depth of 2 mm.

**INGREDIENTS:** Hydrophilic polymer and potassium ferrate

**WARNINGS:** For external use only. Not intended to replace stitches. Do not apply powder to visibly infected wounds. May be harmful if inhaled or ingested. Avoid aspirating the product into the nasal or oral cavity. Avoid contact with eyes; if contact should occur, thoroughly rinse eyes with water. Keep out of reach of children.

**CAUTIONS:** Store in a clean, dry place. Use by expiration date listed. Discard if product is damaged, opened, or if powder has clumped and does not flow freely. Discard contents after use since powder is guaranteed to work only if it has not been left exposed to air or humidity. Occasionally, a temporary warming or stinging sensation may be felt upon application.

**PRODUCT REMOVAL:** If WoundSeal Powder must be removed, as determined by a healthcare professional, brush away loose powder, then soak wound in sterile water until scab starts to loosen from wound. Gently scrape off loosened scab with gloved finger or tongue depressor.

**SYMBOLS GLOSSARY:** [www.biolife.com/symbols](http://www.biolife.com/symbols)

For more information or to share feedback, visit [www.woundseal.com](http://www.woundseal.com) or call +1 (941) 360-1300.

**PRECINTO DE SEGURIDAD: No use el producto si el sellado del blíster está dañado.**

El paquete contiene cuatro (4) bolsas con producto de uso único. Se puede usar el hisopo aplicador incluido para aplicar WoundSeal en polvo en heridas de difícil acceso o a otra persona. Cada bolsa contiene una (1) aplicación de uso único, que incluye un (1) aplicador y un (1) envase blíster de WoundSeal en polvo.

### INSTRUCCIONES DE USO:

Si es posible, limpie la herida y aplique el polvo después de que se reanude el sangrado; debe haber sangre para que el polvo funcione.

Repita la aplicación según sea necesario. La costra protectora puede dejarse en el sitio hasta que se desprenda por sí sola. Evite mojar la costra durante una (1) hora.

**ÁREA DE COBERTURA DE LA HERIDA:** Una (1) aplicación de WoundSeal es suficiente para cubrir un área de herida de hasta 4,6 cm<sup>2</sup> (0,7 pulg.<sup>2</sup>) con una profundidad de 2 mm.

**INGREDIENTES:** Polímero hidrófilo y ferrato de potasio

**ADVERTENCIAS:** Solo para uso externo. No tiene por objeto sustituir las suturas. No aplique el polvo en las heridas que estén visiblemente infectadas. Puede ser nocivo si se inhala o se ingiere. Evite aspirar el producto a través de las fosas nasales o la cavidad bucal. Evite el contacto con los ojos. Si esto sucede, enjuáguese bien los ojos con agua. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

**PRECAUCIONES:** Guarde el producto en un lugar limpio y seco. Úselo antes de la fecha de vencimiento que se indica en el envase. Deseche el producto si está dañado, abierto, o si el polvo está grumoso y no fluye libremente. Deseche el contenido después del uso, ya que la efectividad del polvo solo se garantiza si este no ha sido expuesto al aire o a la humedad. En algunos casos, tras la aplicación puede sentirse una sensación temporal de calor o escozor.

**RETIRO DEL PRODUCTO:** Si debe retirarse WoundSeal en polvo, según lo determine un profesional de la salud, quite el polvo suelto con un cepillo, luego sumerja la herida en agua esterilizada hasta que la costra empiece a desprenderse de la herida. Raspe suavemente la costra aflojada con un dedo enguantado o con un bajalenguas.

**GLOSARIO DE SÍMBOLOS:** [www.biolife.com/symbols](http://www.biolife.com/symbols)

Si desea obtener más información o dejar algún comentario, visite [www.woundseal.com](http://www.woundseal.com) o llame al +1 (941) 360-1300.

Contents are sterile.

El contenido es estéril.

